

Trephine Ejection Kit

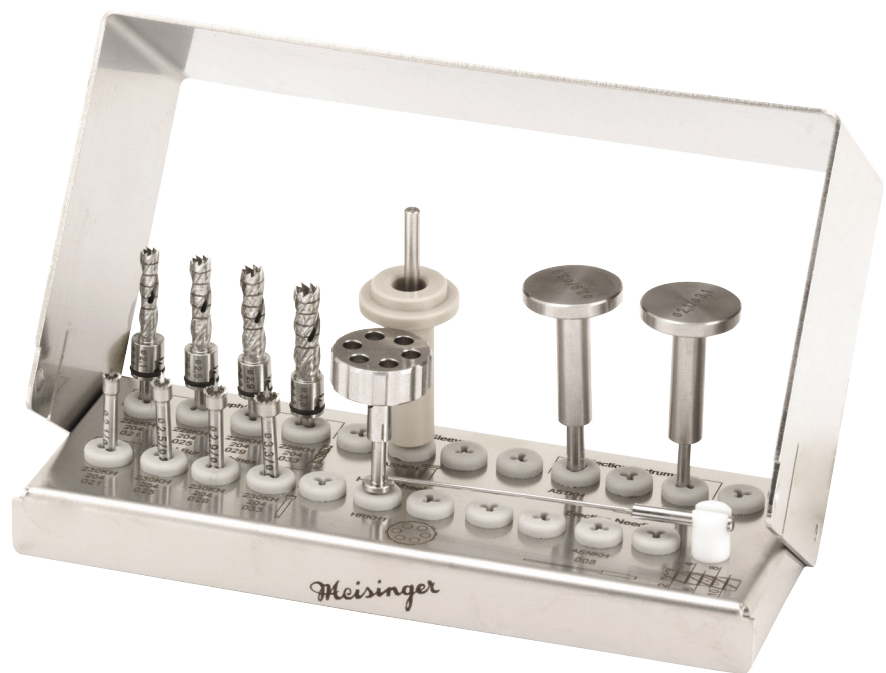
By Prof. Dr. Fouad Khoury

Im Trephine Ejection Kit stecken gleich mehrere einzigartige Ideen, die das Set zu etwas ganz Besonderem machen. Innegekühlte Trepane ermöglichen eine sichere Entnahme von Knochenzylindern. Die Innenkühlung verhindert dabei zuverlässig eine Schädigung des Knochengewebes durch Überhitzung. Die abnehmbaren Trepan-Arbeitsteile erlauben eine besonders einfache Entnahme der herausgefrästen Knochen-

zylinder. Mit Hilfe der speziell auf die Trepan-Durchmesser abgestimmten Ausstoßinstrumente kann der Knochen ganz einfach herausgeschoben werden. Weiter beinhaltet das Set Vorkörner-Trepane, die einer sicheren Trepan-Anwendung dienen. Das Trephine Ejection Kit ermöglicht dem Anwender ein schnelles und sicheres Arbeiten und bietet dank verschiedener Instrumentengrößen hohe Flexibilität.



BTE00



Auf einen Blick

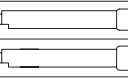
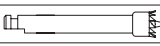
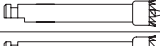
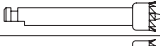
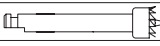
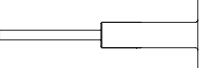
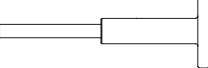
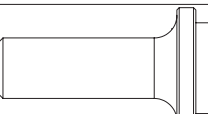
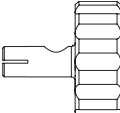
- Zweiteilige Trepane für die sichere und minimalinvasive Entnahme von Knochenzylindern
- Schutz vor Überhitzung des empfindlichen Knochengewebes durch innengekühlte Trepane
- Innovative Anwendung
- Genormte Durchmesser und präzise Tiefenmarkierungen der Trepane ermöglichen die planbare Entnahme definierter Knochenzylinder
- Exakt aufeinander abgestimmte Instrumente für höchste Präzision und Flexibilität

Bei weiteren Fragen berät Sie unser
Außendienst gerne: 02131 2012-303

Meisinger
since 1888

Trephine Ejection Kit

Bestellfax +49 2131 2012-222

	Figur	Schaft	Größe	Innen-/ Außendurchmesser	empf. / max. Drehzahl	Stück / Set	Anzahl	
	BTE00	-	-	-	-	-		
	230KH	RA (204)	021	2.1 mm / 3.1 mm	800 min ⁻¹ / 800 min ⁻¹	1		
	230KH	RA (204)	025	2.5 mm / 3.5 mm	800 min ⁻¹ / 800 min ⁻¹	1		
	230KH	RA (204)	029	2.9 mm / 3.9 mm	800 min ⁻¹ / 800 min ⁻¹	1		
	230KH	RA (204)	033	3.3 mm / 4.3 mm	800 min ⁻¹ / 800 min ⁻¹	1		
	229KH	RA (204)	-	-	400 min ⁻¹ / 4.000 min ⁻¹	4		
	229KH	unmontiert	021	2.1 mm / 3.1 mm	400 min ⁻¹ / 4.000 min ⁻¹	1		
	229KH	unmontiert	025	2.5 mm / 3.5 mm	400 min ⁻¹ / 4.000 min ⁻¹	1		
	229KH	unmontiert	029	2.9 mm / 3.9 mm	400 min ⁻¹ / 4.000 min ⁻¹	1		
	229KH	unmontiert	033	3.3 mm / 4.3 mm	400 min ⁻¹ / 4.000 min ⁻¹	1		
	ASTKH	-	021	-	-	1		
	ASTKH	-	029	-	-	1		
	ASHKH	-	-	-	-	1		
	HRKH1	-	-	-	-	1		
	ASNKH	-	008	-	-	1		

CE 0044

Erhältlich über den Dentalfachhandel.

Ihr Depot:

Ihre Lieferadresse:

Hager & Meisinger GmbH

Hansemannstr. 10 • 41468 Neuss • Germany
Tel.: +49 2131 2012-0 • Fax: +49 2131 2012-222
info@meisinger.de • www.meisinger.de

Bitte beachten Sie auch die Allgemeinen Anwendungs- und Sicherheitshinweise zu MEISINGER Produkten im medizinischen Bereich und auch die Hinweise zur Wiederaufbereitung (Reinigung, Desinfektion und Sterilisation) von Medizinprodukten der Hager & Meisinger GmbH.

85FL119 - 0422