




Get 'em all out Kit NEW

Root Extraction System | according to
Dr. Felix Roth & Dr. Fabian Schiml

Das Get 'em all out Kit besteht aus zwei Chirurgiefräsern (je zwei Stück unterschiedlicher Länge) sowie fünf Handinstrumenten und wurde speziell für die minimalinvasive und vorher-sagbare Zahnentfernung in leichten bis komplexen Fällen konzipiert. Dank des koordinierten Ablaufs ist es für Anfänger wie für Fortgeschrittene geeignet. Mittels der enthaltenen Handinstrumente und Fräsen können Zähne interradi-kulär geteilt, Kronen dekapitiert und sogar Wurzelspitzen durch intraalveoläre Osteotomie dargestellt werden. Im Vordergrund steht der maximale Knochenerhalt hinsichtlich folgender Implantatversorgung. Die ergono-mische Griff-Form der Luxationsinstrumente sorgt dabei für eine kontrollierte und sichere Handhabung. Mit Hilfe des Wurzelrestentferners und der Pinzette können zurückgebliebene Fragmente leicht und sicher entfernt werden. Ein scharfer Löffel dient zur abschließenden Reinigung der Extraktionsalveole.

The Get 'em all out Kit consists of two surgical burs (two of each) and five hand instruments and has been specially designed for minimally invasive and predictable tooth removal in simple and complex cases. Thanks to the coordinated procedure, it is suitable for both beginners and advanced users. Using the hand instruments and burs included, crowns can be removed, roots can be divided and even root tips can be exposed by intra-alveolar osteotomy. The focus is on maximum bone preservation with regard to subsequent implant placement. The ergonomic handle shape of the luxation instruments ensures controlled and safe handling. Residual fragments can be removed easily and safely using the fragment ejector and tweezers. A curette is used for final cleaning of the extraction socket.

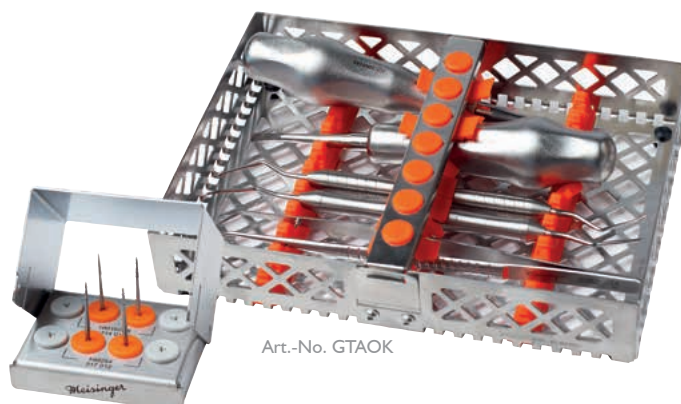

Art.-No. GTAOK

AUF EINEN BLICK

- Optimal aufeinander abgestimmte Instrumente für einen effektiven und strukturierten Extraktionsvorgang
- Sichere Handhabung dank ergonomischer Griff-Form der Luxationsinstrumente
- Hohe Flexibilität durch zwei verschiedene Luxationsinstrumentvarianten (gerade, abgewinkelt)

AT A GLANCE

- Sophisticated assortment of instruments for effective and structured extraction (for both beginners and advanced users)
- Safe handling thanks to the ergonomic handle shape of the luxation instruments
- High flexibility thanks to two different luxation instrument variants (straight, angled)

Hartmetallinstrumente (je 2 Stck.)
Tungsten carbide burs (each 2 pcs.)



Fig.	HM254*	HM162SX*
Shank ¹	317	314
Size ²	012	014
Length mm	6.0	8.0
*  mm	1.2	1.4



¹ 314=FG, 317=FG XXL

² Größter Arbeitsteildurchmesser in 1/10 mm ² Largest working part diameter in 1/10 mm

*  Außendurchmesser External diameter



Fig.	MI182	MI183	MI185	MI056	MI158
Name	Luxationsinstrument gebogen Luxivator curved	Luxationsinstrument gerade Luxivator straight	Wurzelrestentferner Apical fragment ejector	Scharfer Löffel „Khouri“ 2,0 mm Bone Curette „Khouri“ 2.0 mm	Pinzette „College“ Tweezers „College“
Length mm	157.0	157.0	175.0	175.0	175.0